


ACORN TRAPPLIFT

TACK

Tack för att ni har valt ACORN trapplift. Vi kan försäkra er om att vår trapplift kommer att ge många år av pålitlig service och tillåta er att röra er i hela ert hem

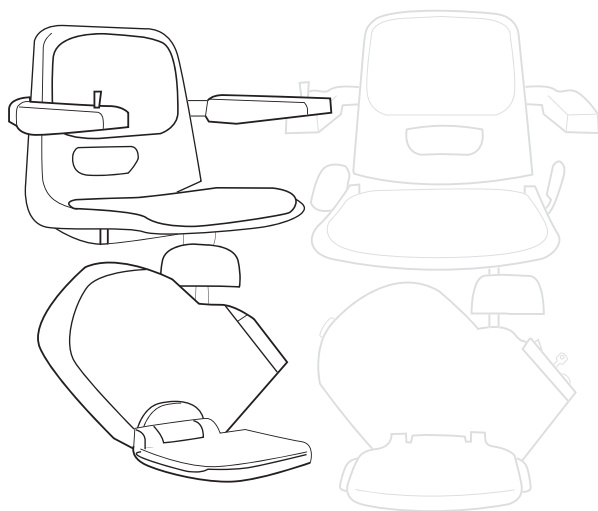

Din Trapplift är försäkrad av en garanti under 24 månader denna täcker delar till trappliften (Om problem uppstår på grund av felaktig användning så täcker ej denna försäkring delar eller lift).

Din trapplift är designad och producerad till en hög standard. Regelbunden underhållning krävs för att försäkra en säker och problem-fri användning.


**Innan ni använder er trapplift, läs denna
instruktions manual**

TRAPPLIFTEN

ACORN Superglide är en elektrisk driven trapplift designad för hemma bruk. Om den används korekkt, så kommer den att ge många år av säker och pålitlig service. Trappliften är designad för att bära en peron med en maximal vikt av 127 Kg

ACORN Superglide 120 får sin kraft från ett batteri pack som finns i liftens vagn, dessa blir sedan laddade från närmaste uttag. Detta betyder att det inte finns någon fara för en elektrisk shock och att liften även kommer att fungera vid strömavbrott.

- ① Vikbara armstöd
- ② Diagnos display
- ③ Styrke spak
- ④ Vridbart säte
- ⑤ Nyckel
- ⑥ Vikbart säte
- ⑦ Säkerhets sensorer
- ⑧ Strömbrytare till batteri
- ⑨ Halk-fri fotstöds yta
- ⑩ Vikbart Fotstöd
- ⑪ Övre säkerhets sensor
- ⑫ Säkerhets bälte
- ⑬ Infra-röda sensorer

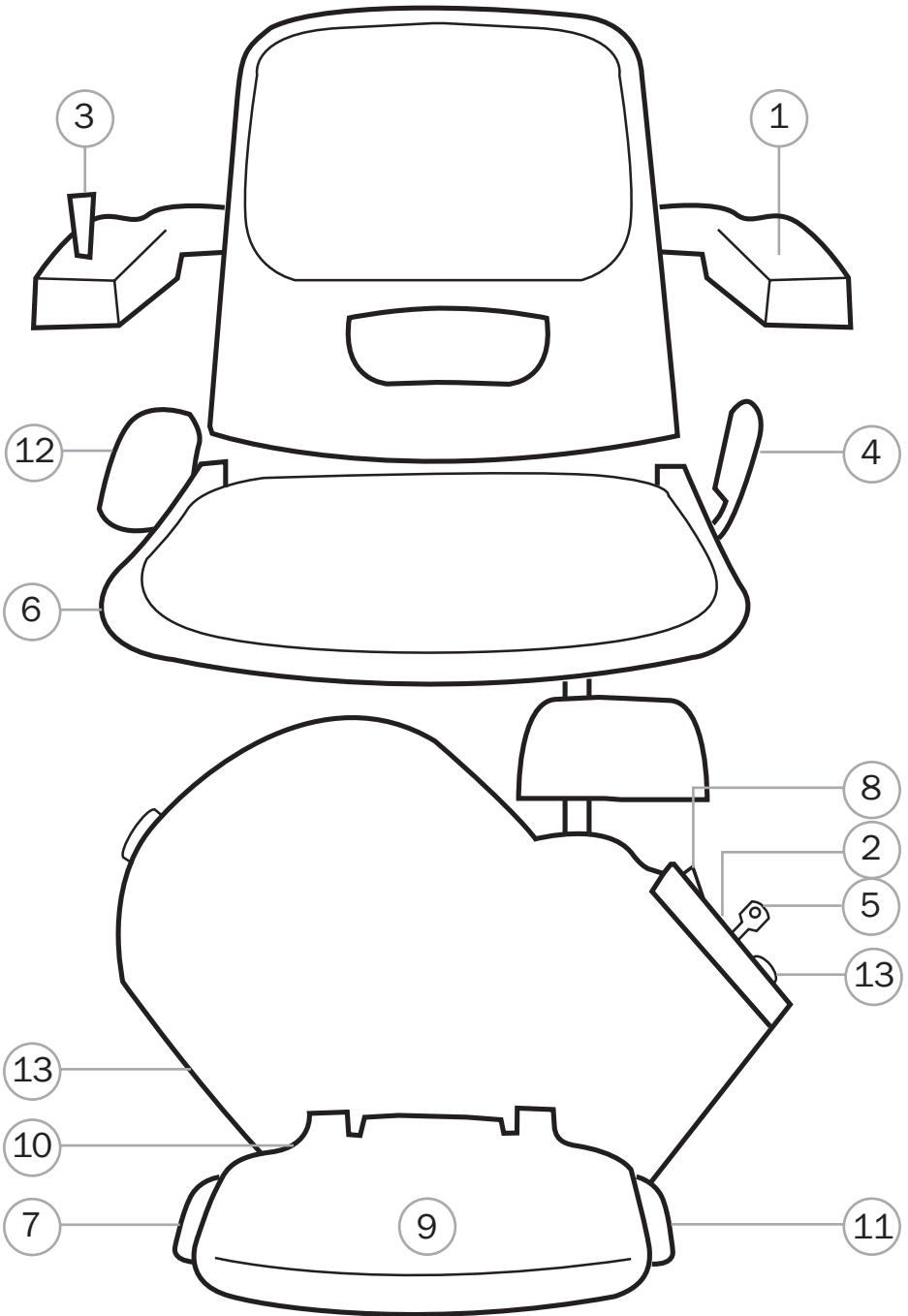

FÖR ER SÄKERHET, NOTERA TEXT NEDAN

- Försäkra er om att trappan ej används av andra eller är hindrad av föremål innan ni använder trappliften
- Slappna av och sitt djupt i sätet med era armar vilande på armstöd och fötter på fotstöd.
- Om säkerhets bälte är installerad fäst detta.




Varning! Trappliften är designad att bära en person i taget. Belasta aldrig liften med mer än en person.

Varning! Låt ej barn leka med trappliften, om barn finns i hemmet försäkra er om att de är under uppsikt. För säkerhet, lås trappliften med nyckeln när ni ej använder den och barn finns i omgivningen för att försäkra att de ej skadas.




Försäkra er om att alla medlemmar av familjen vet var liften finns i ert hem så det ej finns risk för att snubbla över eller skada sig på liften.

Försäkra er om att hemmets husdjur ej finns i närhet när trappliften används för deras säkerhets skull.

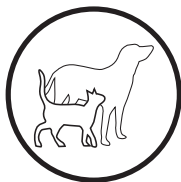

Varning! Försäkra er om att era kläder ej är i vägen för trappliftens resa och dessa kan fastna i liftens motor eller räls. Försäkra er innan resa att kläder ej hänger ut över säte under liftens gång. Om ni vet att något har fastnat i liften kontakta er återförsäljare

Behandla med försiktighet! Det finns en möjlighet att mindre föremål kan hamna på skenan, vilket sedan kan leda motor stopp. Om ni vet att detta kan ha uppstått kontakta er återförsäljare.

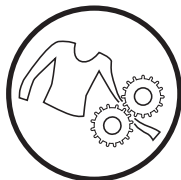

Varning! För att koppla ifrån strömförsörjelsen till trappliften, ta ur laddaren från vägg uttaget. Koppla också av strömbrytaren till batteriet (8) finns på vagnen för att förhindra att batteriet tömms


FUNKTIONER

NYCKEL



Ni kan finna en nyckel på vagnens utsida brevid strömbrytaren. För att liften ska fungera så måste denna vara vriden till höger (klock vis)

Diagnos panelen, finns brevid nyckeln.

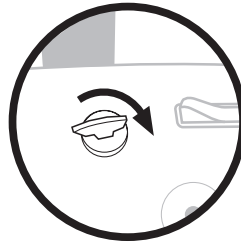


Diagnos panel kommer då att visa nummer **H**, titta gärna på sidorna 157 och 158 för mer information angående nummer som kan uppkomma på diagnos panelen.

När nyckeln ej är i denna position så kommer panelen att visa nummer **S** och liften kommer ej att fungera.

Nyckeln kan också tas bort för att förhindra personer att använda liften.

Detta påverkar ej laddningen av batterierna.

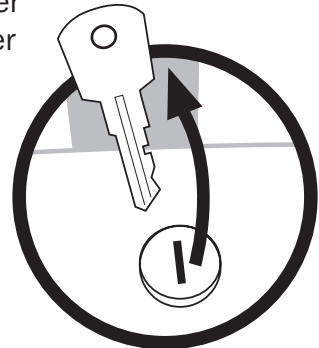


STYRKE SPAK

Styrke spaken finns på armstödet.

För att liften ska resa måste styrke spaken tryckas och hållas mot vägen ni vill resa.

Liften kommer att utgöra ett pipande ljud som visar att liften har fått signalen att resa.

Trappliften kommer att stoppa automatiskt när den har nått slutet av skenan eller när styrke spaken släpps.

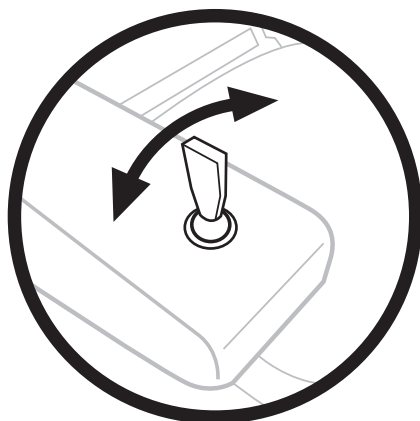


Om pipet ej kan höras, titta gärna på diagnos panelen, gå till instruktioner om koder i denna manual.

FJÄRR KONTROLL



Trappliften kan också fungera med hjälp av fjärrkontrollerna. Det finns två knappar på dessa.


För att kalla liften uppåt tryck och håll den röda knappen. För att kalla liften neråt pressa och håll den gröna knappen. Liften kommer att stoppa automatiskt i slutet av skenan eller om ni slutar att trycka på knappen.

Trappliften fungerar även när arm, fot och säte är uppvikt. Dock ej om sätet är vridet, detta kommer att visas på digitala displayen genom nummer .

I vissa fall så kan frekvensen påverkas av yttre attribut och stanna. Detta är en normal operation för att försäkra att något ej kan hända. Använd fjärrkontrollen på nytt om detta händer för att försäkra er om att frekvensen är tillbaka till normal funktion.

Det är rekommenderat att byta batterierna i fjärrkontrollen var sjätte månad.

VRIDBART SÄTE

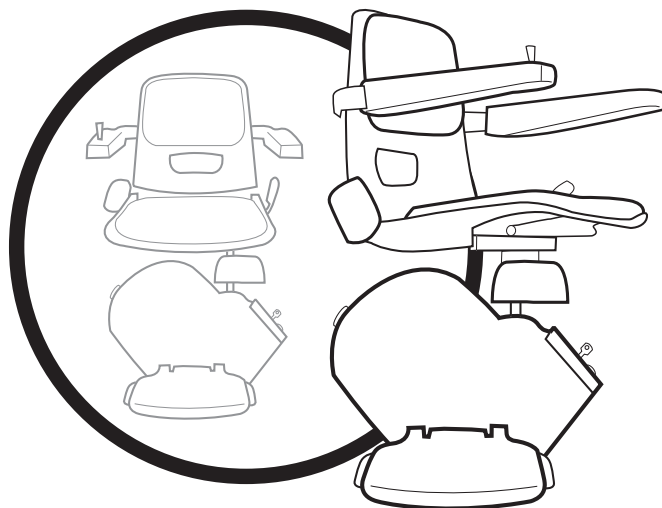


När trappliften har nått toppen av trappa så kommer liften att stanna automatiskt.

Nu kan sätet vridas, genom att trycka ner den svarta spaken på sidan av sätet

Sätet stannar nu i två låsta positioner vilket gör att sätet kan endast gå ut över golvet och ej trappan.

Sätet kommer låsas i 45 och 90 grader och liften kan ej resa utan att sätet är i rätt res-position.


Om den ej är i denna position så visar displayen numer .

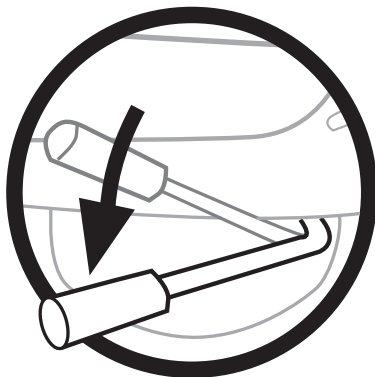

Var vänlig notera att fotstödet ej är vridbart , sätet har denna funktion endast i toppen av trappan vid avstigning.

Försäkra er också om att sätet är i en låst position när ni stiger av eller på.

SÄKERHETS BÄLTE

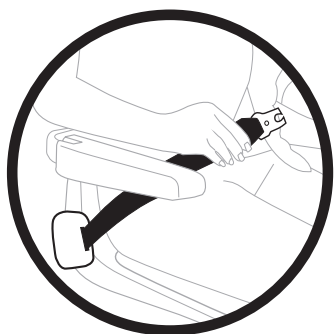


För att fastna säkerhetsbältet, dra ur änden från en sida till andra, knäpp in i spännet på motsatt sida. Ett klickande ljud kommer att indikera att knäppet är i rätt position

För att lossa ditt bälte. Håll bältet med ena handen och tryck ner knäppe för att fria spännet. Bältet kommer att frias automatisk och gå tillbaka till andra sidan.



Det är mycket viktigt att bältet hålls under tiden då ni spänner fast denna, detta för att förhindra skador.

UPPFÄLLBART SÄTE/FOTSTÖD

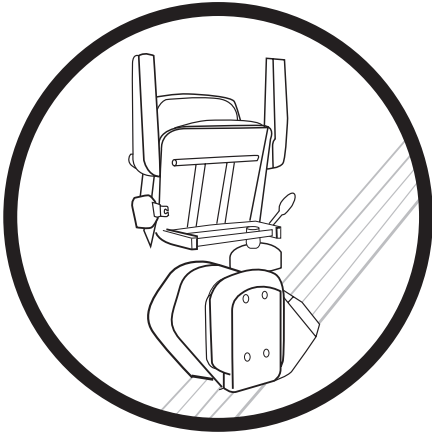

Säte, arm och fotstöd kan fällas upp när liften ej används för att skapa mer plats i trappan och hall.

Liften kan fortfarande fungera med hjälp av fjärrkontrollen

PARKERING OCH LADDNING


När ni ej använder er lift så är det mycket viktigt att liften är pakerad i rätt position på skenan.

Detta beroende på vilken typ av skena som är installerad.

Elektrisiteten i ert hem måste lämnas på under hela tiden.

På en standard skena så är den rätta parkerings position i toppen och botten av skenan. På dessa positioner så kommer liften att mottaga ström genom laddare och tillåta liften att ladda upp batterierna i vagnen.


Trappliften kommer också att indikera den rätt positionen och att den mottagar laddning genom ett pip.

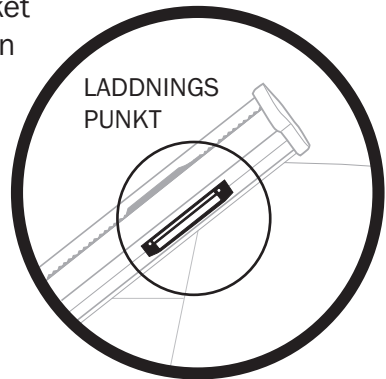


KOPPLA AV STRÖMFÖRSÖRJELSEN

Om trappliften ej kommer att användas under en längre tid pga av semester. Så kan ett alternativ vara att koppla ifrån strömmen till liften från uttag.

Dessa instruktioner måste följas för att undvika batterierna från att laddas ur, om detta skulle uppstå och ni behöver nya så kommer ej ACORNs försäkring att täcka dessa.

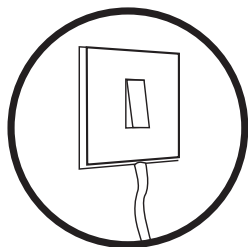

- 1. Ta bort laddaren från vägg uttag.**
(liften kommer att ge ett konstant pipande för att indikera att den ej laddas)

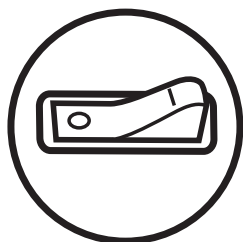

- 2. Tryck strömbrytaren på vagen i av "off" position.** (Strömbrytaren finns previd nyckeln på vagnen)

Genom att genomföra denna procedur så kommer liften att fungera igen när ni återkommer för att använda den. Batterierna stannar i den laddning som var då ni kopplade bort strömmen.

LIFTEN KOMMER EJ ATT FUNGERA

Kontakta er återförsäljare om ni har några frågor angående detta.

Placera era företags detaljer här:

SÄKERHETS EGENSKAPER

Trappliften kommer med många olika säkerhets egenskaper till alla modeller.

Dessa inkluderar-

Vagn säkerhets sensorer, övre och nedre del.

(stoppar liften från föremål i vägen i trappan)

Fotstöd säkerhets sensor övre och nedre del.

(stoppar enheten från föremål i vägen i trappan)

Säte säkerhets sensor.

(Förhindrar liften att resa om ej sätet är i rätt position)

Stopp sensor i övre och nedre del av skena.

(Förhindrar liften från att gå över skena i top/botten)

Hastighets kontrollant.


(Håller liften i en hastighet)

Varning när liften ej laddas.

(Automatiskt varnings ljud)




Om en eller flera säkerhets sensorer är aktiverade så visas dessa i numer på den diagnos panelen. Dessa koder och lösningar finns på följande sidor, de förklarar vad som kan göras för att få liften att fungera igen.


HASTIGHETS KONTROLLANT

Liften är utrustad med en säkerhets sensor (hastighets kontrollant) vilket gör att liften låser sig vid fel och förhindrar liften att öka i hastighet. Om detta skulle uppstå så kommer liften att stanna i en låst position och visa numer  på diagnos displayen. Detta kan lösas genom att använda vridnings hjulet (se nedan).
















HAND VRIDNING HJUL

Vid fel och liften måste vridas upp eller ner för skenan följ nedan.














1. Tryck strömbrytaren på vagn i "off" position, av.
2. Ta bort ACORN märket och för in hjulet.
3. Vrid hjulet i en klock-vis rörelse så att liften rör sig 20 cm upp för skenan.
4. Ta ur hjulet och tryck strömbrytare på vagn i "on" på position.
5. Observera att diagnospanelen kommer att ändras från numer  till numer . Om panelen fortfarande visar numer , upprepa steg 1-4, i motsatt ordning.
6. För liften upp för skenan och observera att den stannar automatiskt. Kontrollera också att alla sensorer fungerar, efter detta klistra tillbaka märket på vagnen.

Varning! Använd aldrig liften med hjulet inne detta kan resultera till skada av motor när  visas. Vrid aldrig liften mot klockan, detta kan resultera till skada på hastighets sensoren. (för mer information kontakta er återförsäljare)

DIAGNOSPANELENS KODER


DISPLAY	FEL	EVENTUELL LÖSNING
	STRÖMAVBROTT	 <p>Kontrollera att strömbrytare på vagn är på.</p>
	NORMAL	 <p>Om fel uppstått försök använda fjärrkontroll. En sensor kan vara i kläm.</p>
	EJ LADDNING	 <p>Liften får ej ström eller är ej på laddnings punkt. Det kommer också indikera detta med ett pipande ljud.</p>
	HASTIGHETS KONTROLLANT (SE HAND VRIDNINGS HJUL)	 <p>Vrid hjul klock vist för att återställa hastighet.</p>
	SÄTE ÄR VRIDET	 <p>Vrid sätet tillbaka till res position. Armstöd ej nerfällt.</p>
	NYCKEL AV	 <p>Kontrollera att nyckeln är vridet klockvist.</p>
	STOPP SENSOR	<p>Liften har gått över den svarta sensoren i top eller botten av trappan. Vrid liften upp eller ner med hjälp av hand vridnings hjul.</p>
	FOTSTÖD SENSOR NEDRE DEI	 <p>Neder sidan av fotstödet säkerhets sensor har aktiverats, se till så ej något har fastnat på denna under del.</p>

DIAGNOSPANELENS KODER

DISPLAY	FEL	EVENTUELL LÖSNING
	FOTSTÖD ÖVER DEL	 Över sida av fotsöd. Se till att fotstödet är ställt i rätt position och att ej något har fastnat.
	VAGN ÖVRE DEL	Övre säkerhets sensor, är aktiverad.
	VAGN NEDRE DEL	Nedre säkerhets sensor aktiverad.
	BATTERIER	 Batterierna är urladdade, låt lift stå på laddnings punkt i minst 1 timme.
	BROMS	 Broms fel. Försök att återställ eller lämna liften på laddnings punkt.
	MOTOR	 Motor fel, kontakta återförljare, bryt all ström till liften se sida 160.
	BATTERIER	 Låg batteri volt (17 volt eller mindre), ladda batterier.
	ELEKTRISKT BRYTNINGS FEL	Kontakta återförsäljare.

VÅRD OCH UNDERHÅLL

FJÄRRKONTROLLER

Som nämnts tidigare så kan det finnas tillfällen då yttre attribut kan påverka kontrollerna och de behövs ställas om. Detta kan göras genom att sända liften till botten av trappan. Vrid sätet så att displayen visar en . Pressa styr spaken i en nedre position (även om liften ej kommer att gå längre) vid samma tillfälle pressa ner den röda knappen på fjärrkontrollen under 5 sekunder. När sätet sedan vrids till rätt position så kommer fjärrkontrollerna att fungera igen.



SKENA

Det rekommenderas att skenan ska rengöras en gång i veckan. Detta ska göras med en torr duk och vanligt rengörings medel (Spray).

Under INGA OMSTÄNDIGHETER får ni använda en VÅT DUK att rengöra skenan med, endast TORR.

Om ni ej rengör skenan regelbundet så kan damm och smuts samlas i skenan vilket kan leda till svarta märken på skena och mindre mjuk resa. Det är också rekommenderat att dammsuga järn tänder i mitten av skenan regelbundet.

SÄKERHETS SENSORER

Om liften ej fungerar och visar ,  eller  så kan detta bero på att något har fastnat mellan skena och vagn. Detta kan återställas genom att knacka mjukt på den aktuella säkerhets sensoren. Om detta händer regelbundet kontakta återförsäljare.

FJÄRRKONTROLLER

Fjärrkontrollerna fungerar genom infra röda signaler. De kan påverkas av låg volt glödlampa om dessa finns i ert hem och ni har problem med er fjärrkontroll så rekommenderar vi att ni byter till en standard.

ANNAT

Om trappliften har en tendens att pipa under regelbundna tillfällen (ungefär 1 gång i minuten) kontrollera om det finns ett rök alarm i närheten av trappliften, detta kan göra att liften avger en låg batteri volt varning.


ÅTERSTÄLLNING

Vid vissa tillfällen så kan det finnas anledning att återställa kontrollborden i vagnen.



Stäng av all ström i cirka 30 sekunder. Detta kommer att återställa koderna i diagnos panelen.

ELEKTRISK BORD DIAGRAM

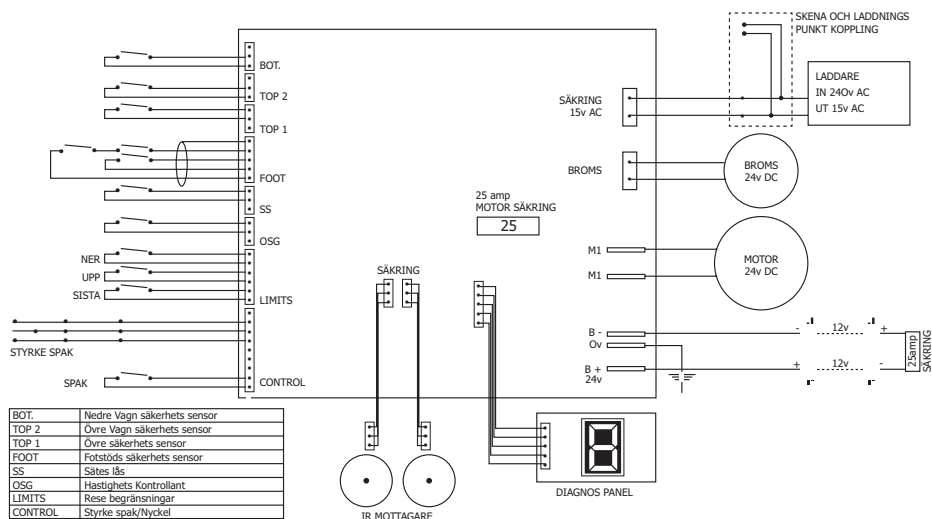

Telecom House
Millennium Business Park
Station Road
Steeton
West Yorkshire
BD20 6RB
UNITED KINGDOM

info@acornstairlifts.com
www.acornstairlifts.com

ACORN arbetar för att förnya och förbättra vår produkt och erhåller därmed rätten att ändra instruktioner utan förvarning.

Bilder i denna instruktion kommer att vara något olikt från den verkliga produkten.

